


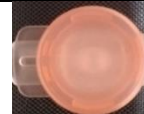







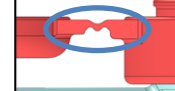
透析用血液回路セット「シュアフロー[®]N」 ニードルレスアクセスポート仕様変更のご案内

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素より格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。
この度、透析用血液回路セット「シュアフロー[®]N」のニードルレスアクセスポートの仕様を変更いたしますので、ご案内申し上げます。
今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

謹白

変更内容

下記4か所の形状を変更いたします。材質と色の変更はありません。
青色ニードルレスアクセスポートも変更いたします。

	変更前	変更後
外観		
①ポート内部の形状変更		
②キャップ内側にガイドを追加		
③キャップ付け根部のヒンジ幅を拡大		
④キャップ付け根部のヒンジ形状変更		

変更理由

- ・ニードルレスアクセスポート内シリコーンスリット部にシリンジ等を挿入する方向を適切にするため、形状を変更いたしました。
- ・キャップの強度を高めるため、形状を変更いたしました。

対象品番

商品コード	JANコード	品番
93002	4987458930027	VSV-7070-NP-1
93003	4987458930034	VSV-7070-NP-2
93005	4987458930058	VSV-7070-V2I-1
93006	4987458930065	VSV-7070-V2I-2

変更開始ロット

25C25P ロット(2025年3月製造分)以降